

ANKLE FUSION NAIL

アンクル フュージョン ネイル


優れた安定性と固定力を兼ね備えた次世代の足関節固定用髓内釘

〈ネイル〉

右/左 10mm x 150mm (1サイズのみ)
(遠位50mmは11mmです)

【適応症例】

- ▶ 関節リウマチ
- ▶ 変形性関節症
- ▶ 足関節全置換不良例
- ▶ トラウマ (脛骨ピロン骨折変形癒合)
- ▶ 偽関節距骨の無腐性壊死
- ▶ 神経障害性関節症
- ▶ 神経障害性関節症
- ▶ 神経筋の疾患に因る重度の変形など

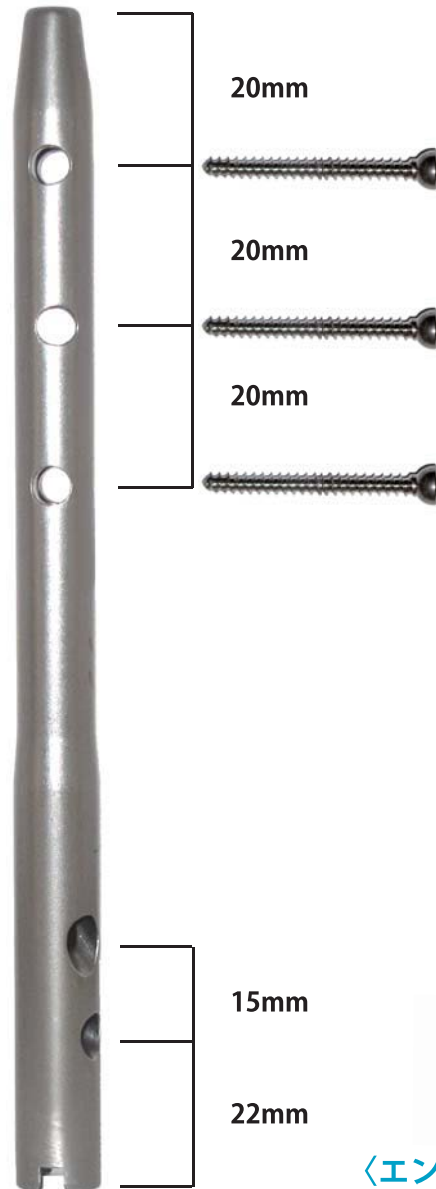

〈チタニウムスクリュー〉
4.5mm x 22mm ~ 60mm
(2mm 刻み)



〈チタニウムスクリュー〉

5.0mm x 50mm ~ 90mm
(5mm 刻み)



〈エンドキャップ〉

0mm、5mm、10mm、15mm (全4サイズ)

型番	品名	規格
17-0540000R*	アングルフュージョンネイル右	10mm x 150mm
17-0540000L*	アングルフュージョンネイル左	10mm x 150mm
17-0540010	エンドキャップ for AFN STD	0mm
17-0540011	エンドキャップ for AFN +5mm	5mm
17-0540012	エンドキャップ for AFN +10mm	10mm
17-0540013	エンドキャップ for AFN +15mm	15mm
17-0545022	チタニウムスクリュー for AFN	4.5mm x 22mm
17-0545024	チタニウムスクリュー for AFN	4.5mm x 24mm
17-0545026	チタニウムスクリュー for AFN	4.5mm x 26mm
17-0545028	チタニウムスクリュー for AFN	4.5mm x 28mm
17-0545030	チタニウムスクリュー for AFN	4.5mm x 30mm
17-0545032	チタニウムスクリュー for AFN	4.5mm x 32mm
17-0545034	チタニウムスクリュー for AFN	4.5mm x 34mm
17-0545036	チタニウムスクリュー for AFN	4.5mm x 36mm
17-0545038	チタニウムスクリュー for AFN	4.5mm x 38mm
17-0545040	チタニウムスクリュー for AFN	4.5mm x 40mm
17-0545042	チタニウムスクリュー for AFN	4.5mm x 42mm
17-0545044	チタニウムスクリュー for AFN	4.5mm x 44mm
17-0545046	チタニウムスクリュー for AFN	4.5mm x 46mm
17-0545048	チタニウムスクリュー for AFN	4.5mm x 48mm
17-0545050	チタニウムスクリュー for AFN	4.5mm x 50mm
17-0550050	チタニウムスクリュー for AFN	5.0mm x 50mm
17-0550055	チタニウムスクリュー for AFN	5.0mm x 55mm
17-0550060	チタニウムスクリュー for AFN	5.0mm x 60mm
17-0550065	チタニウムスクリュー for AFN	5.0mm x 65mm
17-0550070	チタニウムスクリュー for AFN	5.0mm x 70mm
17-0550075	チタニウムスクリュー for AFN	5.0mm x 75mm
17-0550080	チタニウムスクリュー for AFN	5.0mm x 80mm
17-0050085	チタニウムスクリュー for AFN	5.0mm x 85mm
17-0050090	チタニウムスクリュー for AFN	5.0mm x 90mm

グルッポ・ピオインピアンティ社製造 (イタリア/ミラノ)
ISO 9001 / ISO 13485


承認番号：20900BZY00257000*
20200BZY00790000

湯河原厚生年金病院：リウマチ科部長 伊藤勝己先生考案



強度と柔軟性の高いチタン合金 (Ti6Al4V)

近位と遠位のラフスレッド
スクリューが骨とネイル、
そして関節を確実に
固定します

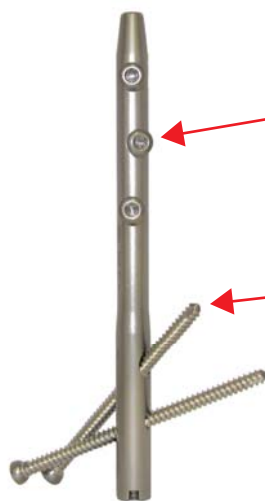

近位部中央の 10° 振れた
スクリューホールによって
ルーズニングの要因となる
マイクロムーブメントを
防止します

遠位部 2 箇所のスクリュー
ホールは 3 次元的に異なる
角度で脛骨と距踵関節間を
確実に固定します

●製品に関するお問い合わせ、サービスのご依頼は下記までご連絡下さい

特約店

TACT MEDICAL III
輸入総発売元
タクト医療株式会社

本社 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-16-1
TEL 03 (5644) 8711 (代) FAX 03 (5641) 5814
金沢 〒920-0031 石川県金沢市広岡 2-13-8
TEL 076 (224) 1815 FAX 076 (224) 1560

※本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により、予告なしに変更することがあります